

Especificaciones

Rendimiento

Modo de trabajo
Rango de presión
Reslex
Tiempo de rampa
Auto On/Off
Nivel de humedad
Alerta
Nivel de sonido
Flujo de salida máxima

Alcance

Auto CPAP, CPAP
4-20 cm H₂O (Paso 0.5 cm H₂O)
Apagado/1/2/3
0~60 minutos
Apagado (Preterminado)
Apagado / 1-5
Falla de Energía-Fuga Alta
28 dBA(a la presión de 10 cmH₂O)
Presión de Prueba(hPa) 4 10 15 20
Presión en el puerto de conexión(hPa) 3 9 14 19
Flujo promedio en el puerto de conexión(L/m) 85 135 140 140

Otros

Peso 1.9 kg
Dimensión 274 mm × 184 mm × 115 mm
Corriente 100 - 240 V AC, 50/60 Hz, 2.0 A
Humedad 15% a 93% Sin condensación
Presión atmosférica Operación 760 a 1060 hPa
5°C a 35°C (41°F a 95°F)
Transporte/Almacenamiento -25°C a 70°C(-13°F a 158°F)
Temperatura máxima de gas suministrada ≤ 43°C
Tipo de protección contra descargas eléctricas Equipo Clase II
Grado de protección contra choque eléctrico Tipo BF Parte Aplicada
Grado de protección contra el ingreso de agua IP22

BMC Medical Co., Ltd.

Room 901, Building 1, No.28 Pingguoyuan Road, Shijingshan, Beijing 100041, China
Tel: +86-10-5166 3880 Fax: +86-10-5166 3880 ext. 810 en.bmc-medical.com



RESmart Auto CPAP System

G2S A20

RESmart G2S A20 es un dispositivo de presión de Auto-ajuste CPAP (presión positiva continua en la vía aérea) con humidificador integrado, diseñado para el tratamiento de la apnea obstructiva del sueño (AOS) en adultos, en el hospital o en el hogar.

Use G2S A20, disfrute el sueño de toda la noche, diga adiós a sus ronquidos.



Operación Fácil

Humidificador integrado, más pequeño, más ligero



Pantalla a color de 2.4 pulgadas



Cámara de agua con estructura drawer-type, más conveniente para llenar y limpiar el agua




Panel de control de 3 botones, simple y fácil de usar



Estable y Cómodo

- ◆ Nivel de ruido 28 dB, lo hace sentir más tranquilo
- ◆ Compensación automática de fugas y de altitud
- ◆ Gran placa, mayor eficiencia de humidificación
- ◆ Reslex, la función de liberación de presión de exhalación
- ◆ Automático Encendido / Apagado
- ◆ Compatible con tubos de 15/22 mm

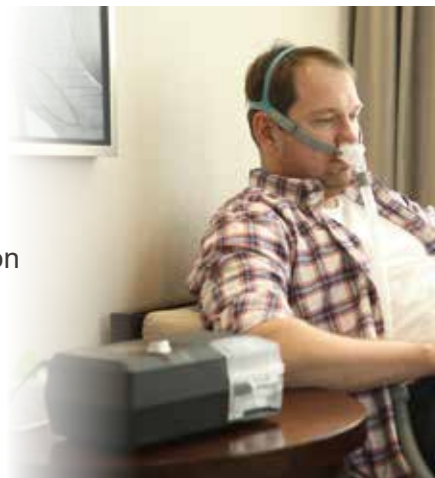


Metodos de Revisar el Informe

- ◆ Informe rápido vía la pantalla del dispositivo
- ◆ BMCares App(iCode / iCode QR / iCode QR+)
- ◆ RESmart nPAP Software (Tarjeta SD)
- ◆ Web version (www.icodeconnect.com/quick/info)



Accesorios

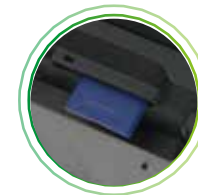

SD Card (8 GB)
60110131



Air Filter (AF-B2, Black)
60380153



SpO₂ Kit (KS-CM01)
61230015



Heated Tubing System
60110081



Water Chamber (WT-C1)
60350392



DC/DC Converter
603B0069